




MEDISEAL
KÖRBER SOLUTIONS

MARS - MEDISEAL ASSISTANCE REMOTE SERVICE

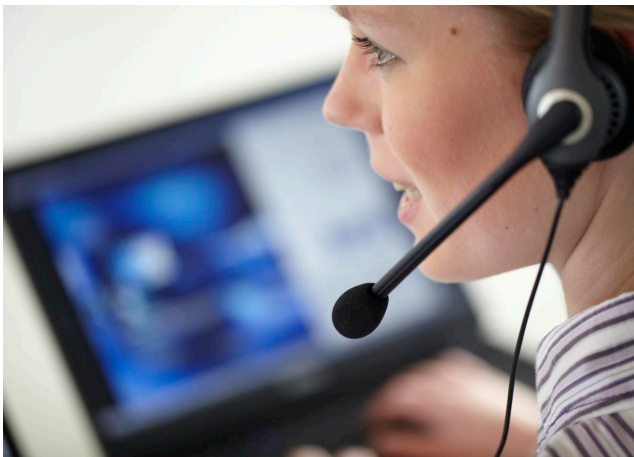

Konzept:

- Mediseal betreibt den Meeting Point Architecture (MPA) Server
- Das Maschinennetzwerk ist mit dem MPA über, den in der Maschine eingebauten, Meeting Point Router (MPR) verbunden
- Die Fernwartungsverbindung wird und kann nur vom Kunden angefordert werden
- Die Servicetechniker verbinden sich über MPA/MPR weltweit
- Der MPR gewährleistet eine sichere Internetverbindung zwischen dem Laptop des Servicetechnikers und dem Maschinennetzwerk



Ihre Vorteile:

- Schnelle weltweite Unterstützung durch Fernwartungssoftware
- Minimale Anforderungen an die kundenseitige Firewall
- Einfache Handhabung durch den Maschinenbediener
- Maximale Sicherheit (PKI mit x.509-Zertifikaten)
- Dokumentierter Zugriff
- Verbindung kann nur vom Kunden initiiert werden



Mediseal
T. +49 5207 888-0
info@mediseal.de